

# VEINOPPLUS®

le nouveau traitement

## Insuffisance Veineuse

Jambes lourdes, gonflées, douloureuses

Douleurs veineuses pendant la grossesse

Œdèmes des membres inférieurs\*

Syndrome post-thrombotique

Situations à risque pour  
votre capital veineux

...



Demandez à votre médecin, à votre professionnel de santé  
ou rendez-vous sur [www.veinoplus.fr](http://www.veinoplus.fr)


\*d'origine veineuse

# VEINOPLUS®


principaux résultats cliniques :

## RÉDUCTION DE LA DOULEUR DANS LES JAMBES

Population de patients insuffisants veineux<sup>1</sup>

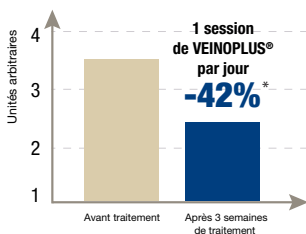


Population de femmes enceintes souffrant d'insuffisance veineuse<sup>2</sup>

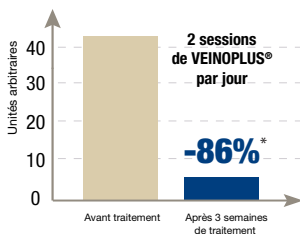

## RÉDUCTION DES OEDÈMES

Diminution de l'œdème au niveau de la cheville chez 30 patients classés CEAP C3\*\* après 30 jours de traitement avec VEINOPLUS®<sup>3</sup>

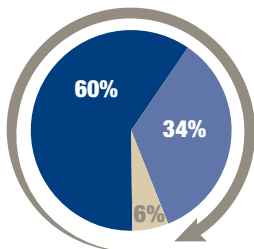


94% des cas

- Réduction totale
- Réduction partielle
- Pas de réduction

## AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE

Diminution de l'impact de la maladie veineuse sur la qualité de vie<sup>2</sup> dans une population de 38 femmes enceintes

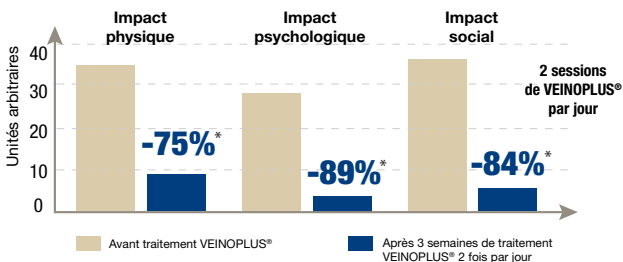

1- ZUCCARELLI F. et al. : Activation de la pompe musculaire du mollet par électrostimulation VEINOPLUS® Angéiologie 2005;57:48-54. • 2- LE TOHIC A et al. Effets de l'électrostimulation par VEINOPLUS® sur les troubles circulatoires des membres inférieurs chez la femme enceinte. In Gynécologie Obstétrique & Fertilité 2009;37:18-24 (données extraites du groupe N°2). • 3- BOGACHEV V.Y. et al. : Stimulation neuromusculaire avec VEINOPLUS® - une nouvelle méthode pour le traitement de l'Insuffisance Veineuse Chronique dans les membres inférieurs. In PHLEBOLOGY (Russ. Assoc. of Phlebology & IUP) 2010; Vol; 1, Issue 4 Pages 22-25.

\* significatif p < 0,001

\*\*CEAP : classification internationale de l'Insuffisance Veineuse (C3 = signes cliniques d'œdème)

# VEINOPUS<sup>®</sup>

est recommandé pour :

## ■ Les symptômes de l'Insuffisance Veineuse

- Jambes lourdes, douloureuses, gonflées
- Douleurs veineuses pendant la grossesse
- Œdèmes des membres inférieurs\*
- Crampes nocturnes\*
- Impatiences\*
- Syndrome post-thrombotique
- Ulcères veineux\*\*

## ■ Les situations à risques

- Antécédent de Trombose Veineuse Profonde (TVP)
- Professions à risques (serveurs, personnel de bord...)
- Station assise ou debout prolongée
- Immobilisation des membres inférieurs (plâtre...)
- Voyages long courrier (> 4h)
- Manque d'activité physique
- Excès de poids, obésité

**88% de satisfaction  
suivant notre dernière  
étude utilisateurs\*\*\***



\*d'origine veineuse \*\*après avis médical

\*\*\* étude menée sur 100 patients

# VEINOPLUS®

## Qu'est-ce que VEINOPLUS® ?

VEINOPLUS® est un **electrostimulateur médical fonctionnant sur piles** (CE médical : classe IIa). VEINOPLUS® stimule la « pompe du mollet » qui assure la majeure partie du retour veineux physiologique.

## VEINOPLUS®... une technologie efficace

VEINOPLUS® a des **effets thérapeutiques uniques sur différents symptômes de la Maladie Veineuse** : des simples « jambes lourdes » aux situations les plus graves de l'Insuffisance Veineuse Chronique. Ces effets\* ont été démontrés et documentés dans plusieurs études cliniques effectuées depuis 2004 en France, au Royaume-Uni, aux USA et en Russie.

## VEINOPLUS®... une technologie sûre



VEINOPLUS® répond aux standards de sécurité les plus exigeants établis aux USA (norme AAMI/ANSI NS4 1986/2002). VEINOPLUS® peut même être utilisé pendant la grossesse, comme l'a démontré une étude clinique effectuée en France<sup>1</sup>.

## UTILISER VEINOPLUS®... rien de plus facile !

- placer 1 électrode sur chaque mollet ou si le problème est unilatéral placer les 2 électrodes sur un même mollet,
- régler l'intensité de la stimulation au niveau maximum confortable,
- ... **l'appareil s'arrêtera automatiquement au bout de 20 mn.**

## Quand utiliser VEINOPLUS® ?

En fonction des symptômes\* :

- une fois par jour minimum au début du traitement,
- puis lorsque vous en ressentez le besoin,
- plus vous utilisez VEINOPLUS®, plus vous en sentirez les effets bénéfiques

## Y-a-t-il des contre-indications au VEINOPLUS® ?

L'appareil ne doit pas être utilisé chez les personnes portant un pace-maker ou un défibrillateur cardiaque. Pour les précautions d'emploi se référer au mode d'emploi. En cas de doute demander à votre médecin.

## Vous avez des questions ?

Rendez-vous sur notre site [www.veinoplus.fr](http://www.veinoplus.fr), ou à celui de votre distributeur.

\*Les effets ne sont pas garantis et peuvent être variables en fonction des personnes et des symptômes.

1. A. Le Tohic et al. « Effets de l'électrostimulation par VEINOPLUS® sur les troubles circulatoires... » (référence citée)

Fabriqué par :

**Ad Rem Technology SARL**

**ACL 427 054 1**

162, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris - FRANCE

Tél : +33 (0)1 42 60 00 22 - Fax : +33 (0)1 42 60 00 63 - [www.adremtechnology.fr](http://www.adremtechnology.fr)

ISO 13485:2003 & ISO: 9001:2008

RCS PARIS N° 453 317 265

Distribué par :